



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult instructie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Mode d'emploi de Cricath Adult

Nom Ventinova Medical B.V.



Nom du produit	Cricath® Adult	Stérile	
Logo du produit		A usage unique	
Diamètre interne	2.0 mm	Consulter le mode d'emploi	
Longueur	7 cm		
Numéro de produit		Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel	

Opérateur

Cricath Adult doit être utilisé par des membres du personnel médical formés et expérimentés dans le domaine de la gestion des voies respiratoires, ou sous la supervision de ces professionnels.

Indication

Cricath Adult permet d'accéder à la trachée d'un patient adulte lorsqu'il n'est pas possible de réaliser une intubation classique avec masque et/ou sonde endotrachéale de grand diamètre.

Groupe de patients

Adultes

Contre-indications

Aucune connue à ce jour

Complications éventuelles

- Hémorragie
- Hématome
- Déplacement du cathéter
- Tissus Emphysemateux
- Pneumomédiastin
- Perforation de l'œsophage

Description du produit

Cricath Adult est un cathéter de coniotomie de 7 cm de longueur et de 2 mm de diamètre, doté d'une aiguille de 1.8 mm.

Emballage

- L'emballage contient le produit Cricath Adult, ainsi qu'une seringue et une sangle de cou.
- Le produit est conditionné dans un emballage avec opercule détachable, stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Mode d'emploi de Cricath Adult

- Cricath Adult reste stérile tant que l'emballage est intact et fermé. Ne pas utiliser Cricath Adult en cas de doute concernant l'intégrité de l'emballage.
- Eviter toute exposition prolongée à la lumière.

Accessoires supplémentaires requis

- Eau stérile
- Dispositif de ventilation avec raccord Luer mâle (par exemple, Ventrain®)

Mises en garde et précautions

- N'utiliser le Cricath Adult qu'en combinaison avec des systèmes de ventilation adaptés à des cathéters fins, par exemple le Ventrain. Prière de se référer au manuel d'utilisation du dispositif de ventilation pour plus d'informations.
- Fixer solidement le dispositif Cricath Adult lors de son utilisation, afin de maintenir, en permanence, le cathéter en position dans la trachée. Le déplacement du Cricath Adult hors des voies respiratoires peut provoquer un emphysème sous-cutané.
- Ne pas réinsérer dans le cathéter une aiguille qui en a été retirée. Cela risquerait d'endommager ou de perforer la paroi du cathéter.
- Si possible, procéder avec une anesthésie locale dans un local aseptisé.

Consignes d'utilisation

- 1 Retirer le tube de protection du cathéter, remplir la seringue d'eau stérile ou de solution saline, puis fixer la seringue au cathéter.
- 2 Préparer la partie antérieure du cou du patient.

- 3 Repérer, par palpation, la membrane crico-thyroïdienne qui se trouve entre le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde (*figure A and A**).
- 4 Stabiliser la trachée entre le pouce et l'index.
- 5 Maintenir le cathéter au niveau de l'embase transparente de l'aiguille ou de la seringue remplie d'eau.
- 6 Insérer le cathéter en direction caudale, en faisant passer la pointe de l'aiguille à travers la membrane crico-thyroïdienne (*figure A and A**). Lorsque l'aiguille pénètre la trachée, une perte de résistance peut se faire ressentir.

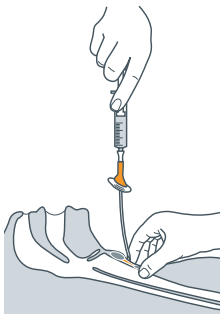


Figure A



La membrane crico-thyroïdienne

Figure A*

- 7 Tirer sur le piston de la seringue pour vérifier le positionnement du cathéter dans la trachée (*figure B*). De l'air est alors aspiré.
- 8 Faire progresser lentement le cathéter seul dans la trachée, en direction caudale, jusqu'à ce que le bord touche le cou (*figure C*).

Mode d'emploi de Cricath Adult

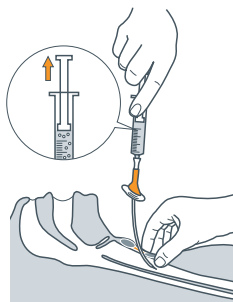


Figure B

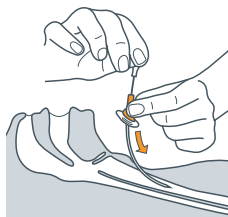


Figure C

- 9 Ensuite, retirer l'aiguille (figure D). Ne pas réinsérer l'aiguille dans le cathéter lorsque celle-ci a été retirée. Cela pourrait endommager voire percer la paroi du catheter.
- 10 Attacher la seringue au cathéter et aspirer à nouveau l'air pour vérifier le positionnement du cathéter.
- 11 Fixer le cathéter avec la sangle fournie ou à l'aide d'un autre moyen (figure E).

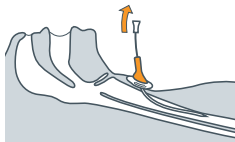


Figure D



Figure E

- 12** Raccorder un dispositif de ventilation adéquat (par exemple, Ventrain) au cathéter (*figure F*).

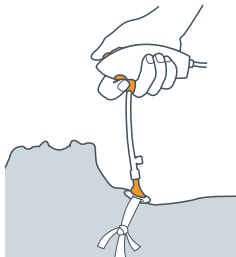


Figure F

© 2018 Ventinova, Eindhoven, Pays-Bas, tous droits réservés.
® 2018 Ventinova, Ventrain et Cricath sont des marques déposées de
Ventinova Medical.

December 2018



MSS171-00

www.ventinovamedical.com



Ventinova Medical B.V. 5652 BJ Eindhoven **T** +31 (0)40 751 60 20
A Meerenakkerplein 7 The Netherlands **E** info@ventinova.nl